



Q-interactive gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Q-interactive



Inhoud

1. Hoe stel ik mijn iPads op de juiste manier in?	3
- Instellingen aanpassen voor optimaal gebruik van de app	3
1. Helderheid en automatisch slot instellen	3
2. Wifi activeren	4
3. Bluetooth activeren	5
4. Rotatievergrendeling instellen	5
- De Assess app installeren	6
- Applicatie-instellingen wijzigen	7
1. Applicatie modus instellen	7
2. Audio-opnames	8
3. Assess toegang geven tot lokaal netwerk	9
2. Central-omgeving	10
- Inloggen op de centrale omgeving	10
- Instellen van de Twee-factor Verificatie	10
- Nieuwe cliënten aanmaken	11
- Batterijen aanmaken	12
- Afnames bekijken en klaarzetten	14
- Oefenafname klaarzetten	17
- Supportpagina bekijken met de handleidingen	17
3. Assess-app	18
- Inloggen op de Assess-app	18
- Beginscherm	19
- Overzicht testbatterij	19
- Bewerken van de afname	20
- Starten afname	21
- Synchroniseren van de afname	21
4. Resultaten uit Assess bekijken in Central	22
- Batterij en Resultaten	23
- Notities	23
- Creëer Rapport	24
- Archiveer	24
- Item Niveau Scores	25

1. Hoe stel ik mijn iPads op de juiste manier in?


- Instellingen aanpassen voor optimaal gebruik van de app

Om je iPads gebruiksklaar te maken voor Q-Interactive dien je een aantal instellingen aan te passen. Hieronder vind je stap voor stap uitleg.

1. Helderheid en automatisch slot instellen

Om ervoor te zorgen dat tekst en stimuli visueel correct worden weergegeven en dat de iPads niet na korte tijd automatisch vergrendelen, dien je de volgende stappen uit te voeren om dit aan te passen.


Stap 1. Ga naar instellingen

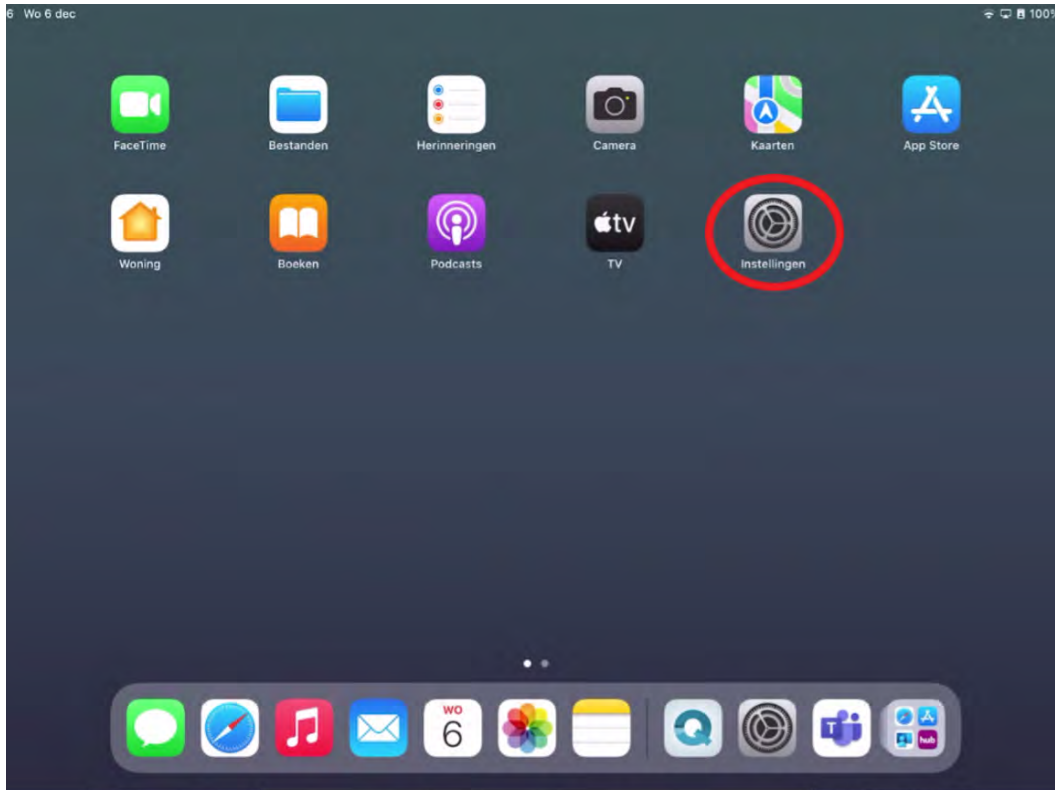

Stap 2. Ga naar Scherm en Helderheid

Stap 3. Pas de Helderheid aan naar de maximale helderheid en zorg ervoor dat True Tone uitgeschakeld staat. Zo voorkom je dat de helderheid zich vanzelf aan gaat passen.


Stap 4. Zet het automatische slot op 15 minuten.

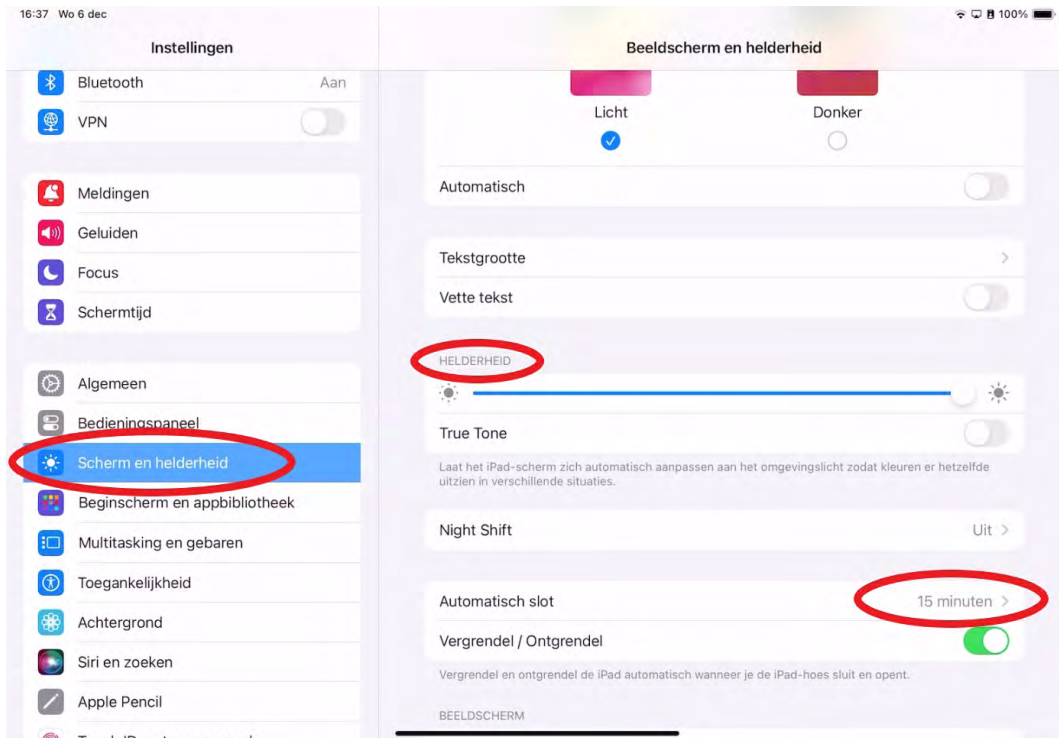

2. Wifi activeren

Stap 1. Ga naar de instellingen van je iPad en tik op 'Wifi'.


Stap 2. Zet het schuifje van de 'Wifi' aan en verbind met een netwerk.

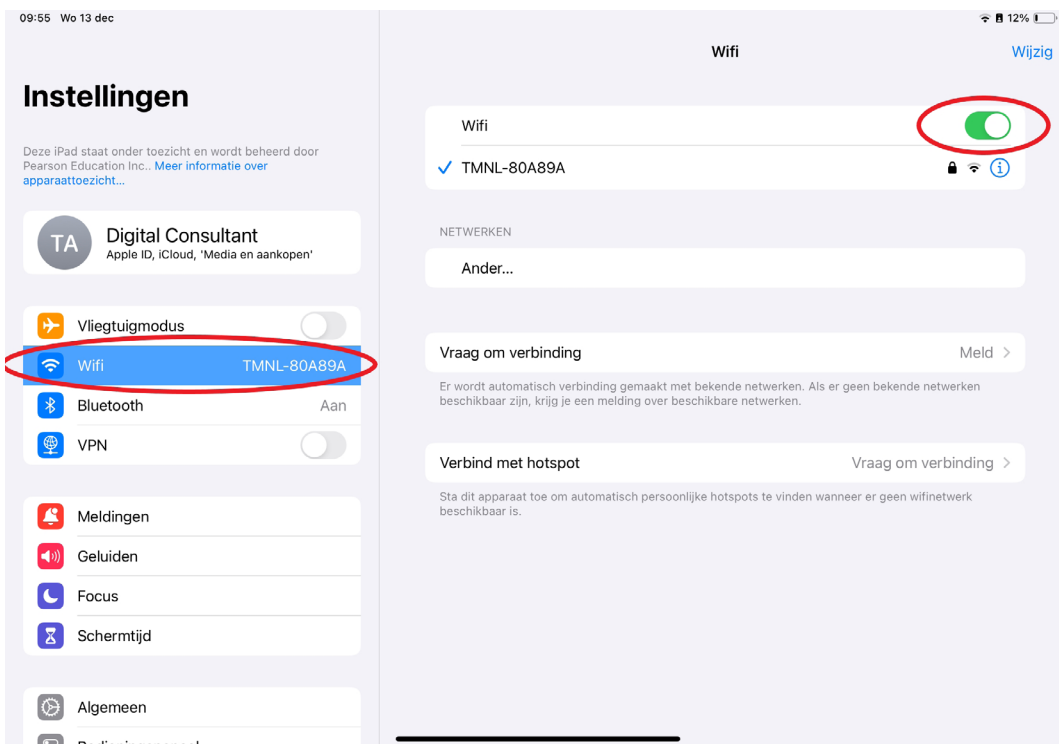

3. Bluetooth activeren


Stap 1. Ga naar de instellingen van je iPad en tik op 'Bluetooth'

Stap 2. Zet het schuifje van de 'Bluetooth' aan.

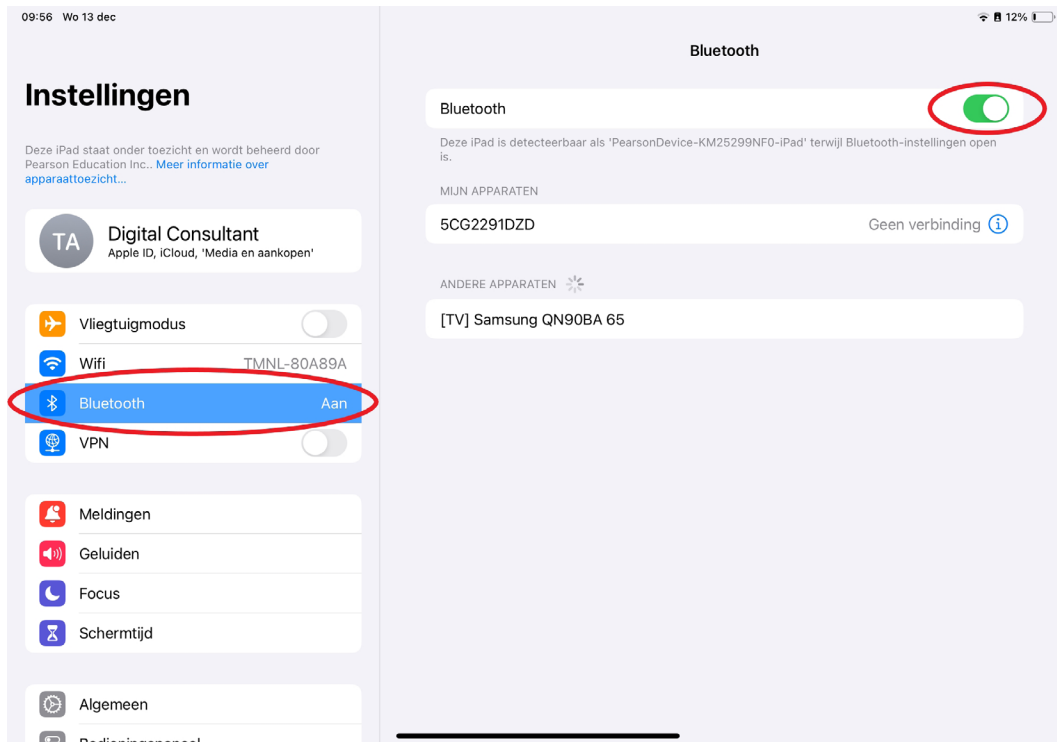

4. Rotatievergrendeling instellen


Schuif vanaf rechtsboven het scherm naar beneden. Vervolgens krijg je het onderstaande scherm te zien. Zet de rotatievergrendeling aan.

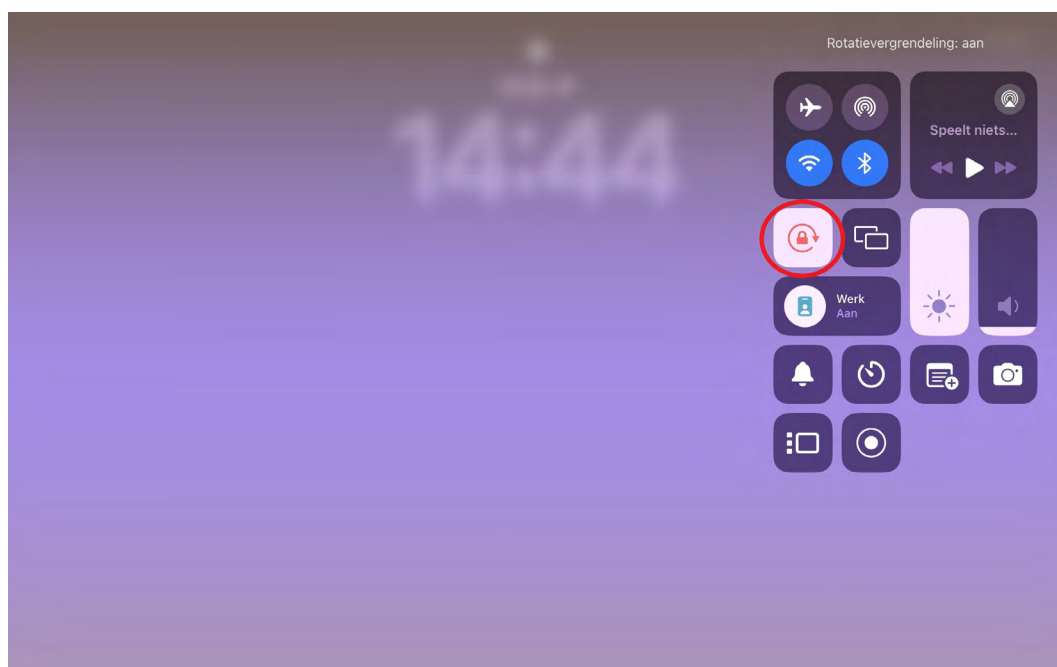


- De Assess app installeren

Assess is een applicatie die je kunt downloaden uit de Apple App Store, te vinden op de iPad. Voordat we de nodige aanpassingen aan de instellingen van Assess uitvoeren, moeten we deze app eerst installeren. Om apps te kunnen downloaden vanuit de App Store is een Apple ID nodig. De instructies hieronder beschrijven stap voor stap hoe je de Assess-app kunt downloaden.

Stap 1. Ga naar de App Store, deze is te vinden op de iPad met het volgende pictogram (<https://www.apple.com/nl/app-store/>)

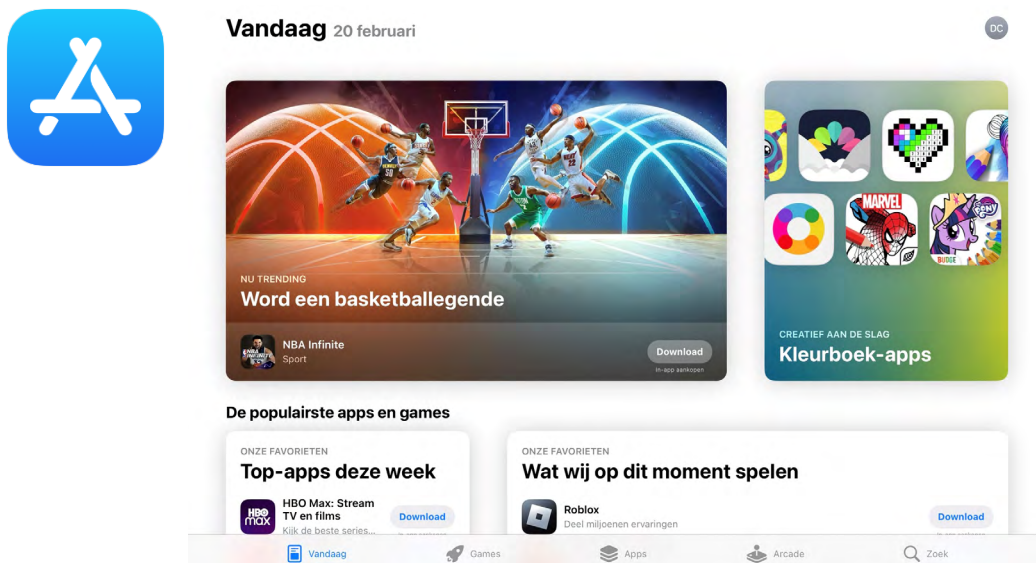


Stap 2: Ga naar het zoekveld en voer Q-interactive in. Nu verschijnt de Q-interactive app in de zoekresultaten.

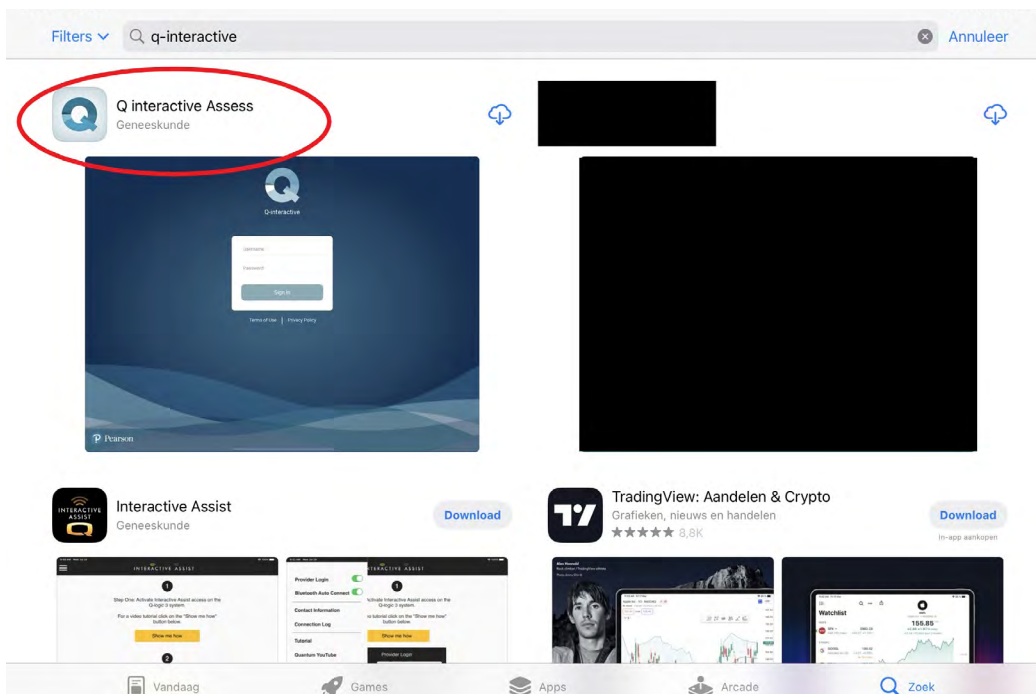

Stap 3: Tik op 'Download' en volg de instructies op het scherm. Als je de app al een keer eerder hebt geïnstalleerd en vervolgens hebt verwijderd, dan zal er bij de tweede keer een wolkje met een pijltje staan in plaats van 'Download'.

Als je deze stappen hebt uitgevoerd, kun je de Q-interactive Assess openen vanaf je iPads. *(Let op, de app dient op beide iPads gedownload te worden)*

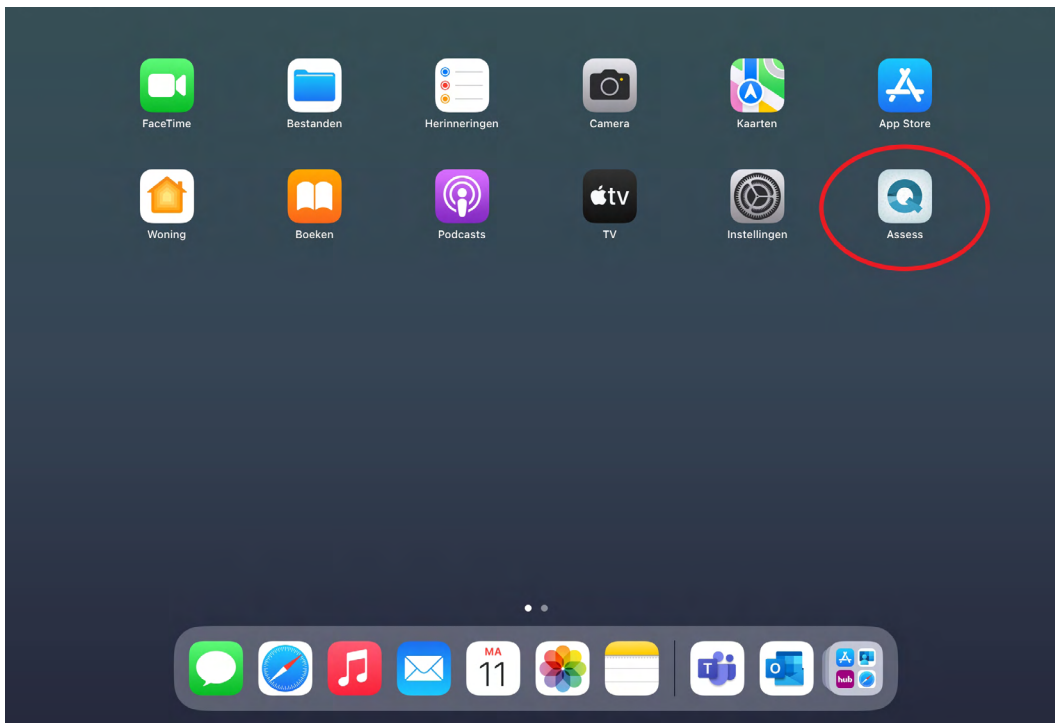

Opmerking: Voor gebruikers van iCloud is het handig om te weten dat bestanden die zijn aangemaakt door Q-interactive om veiligheidsredenen niet in de iCloud kunnen worden bewaard. Testafnamegegevens zijn dus niet toegestaan in de iCloud en kunnen ook niet worden gesynchroniseerd met servers van Apple.


Nu de Assess-app op beide iPads is geïnstalleerd, kunnen we de specifieke Assess-appinstellingen gaan wijzigen.

- Applicatie-instellingen wijzigen


1. Applicatie modus instellen

Na het installeren van de app is het essentieel om de applicatiemodus in te stellen, wat op twee manieren kan worden gedaan.

- De eerste methode is om in te loggen in de app op de iPad, waarna de app zelf zal vragen of het om de testleider- of de cliënt-iPad gaat.

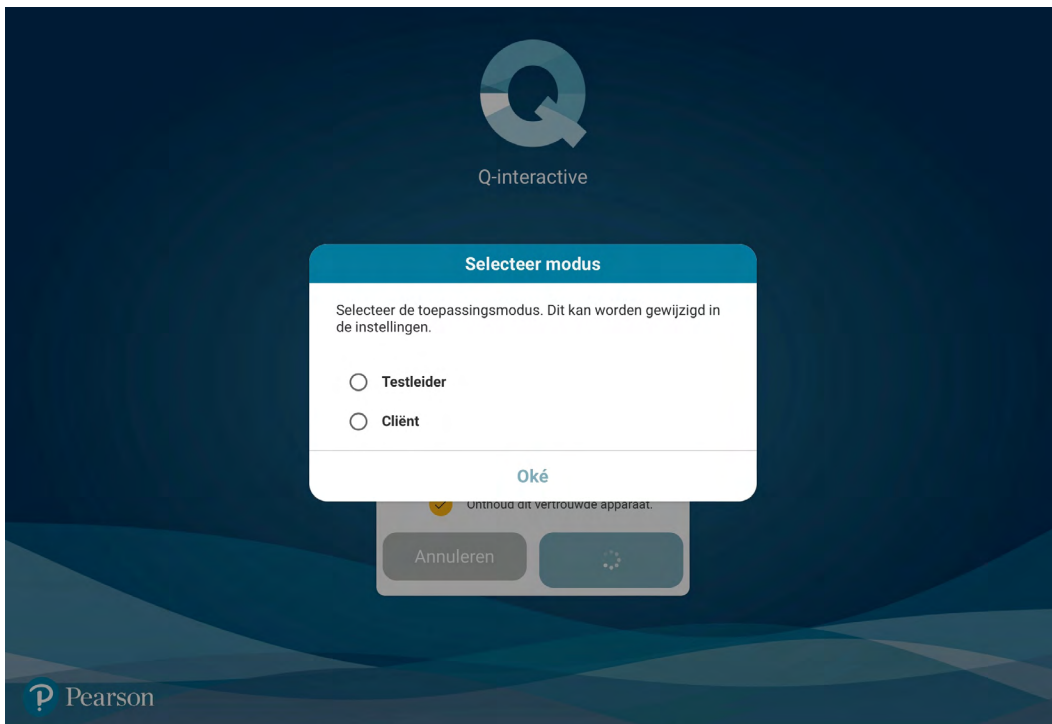


- Voor de tweede methode navigeer je naar de instellingen van de iPad. Scrol vervolgens naar beneden totdat je de 'Assess' app tegenkomt. Hier kun je handmatig de applicatiemodus voor die iPad instellen.

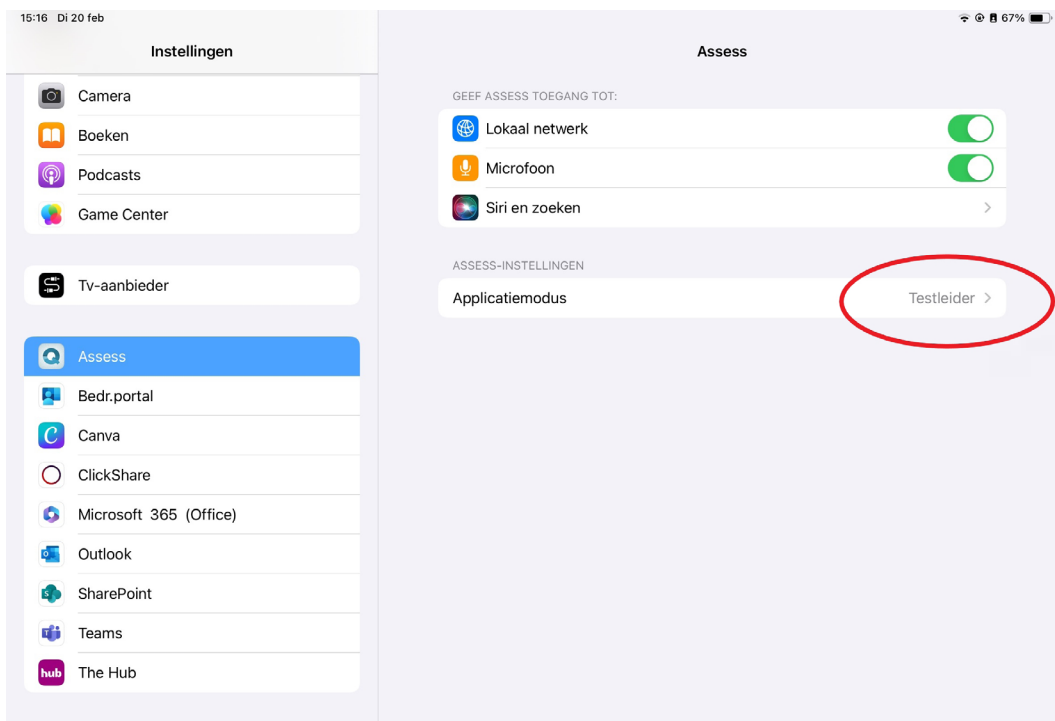

2. Audio-opnames


Bij sommige subtests wordt het antwoord van een cliënt automatisch opgenomen. Bij het scoren van de antwoorden kunt je de opnames gebruiken om de score indien nodig te

valideren of verduidelijken. Voor optimaal gebruik van Q-interactive en de nauwkeurigheid van de tests, raden wij je aan om deze audio-opnames te gebruiken. Het kan echter voorkomen dat je geen toestemming kunt krijgen van een cliënt voor het maken van een geluidsopname. In dit geval kun je met behulp van de iPad instellingen de opnamefunctie uitschakelen.

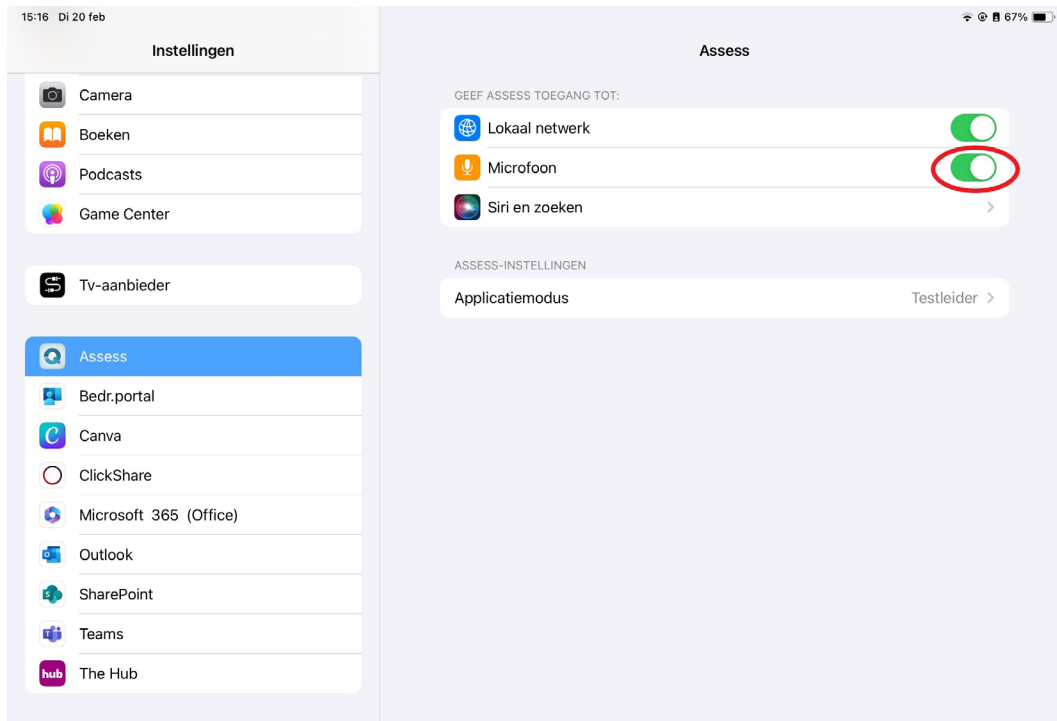

3. Assess toegang geven tot lokaal netwerk

Het schuifje van 'Lokaal netwerk' moet aanstaan om connectie te krijgen tussen beide iPads.

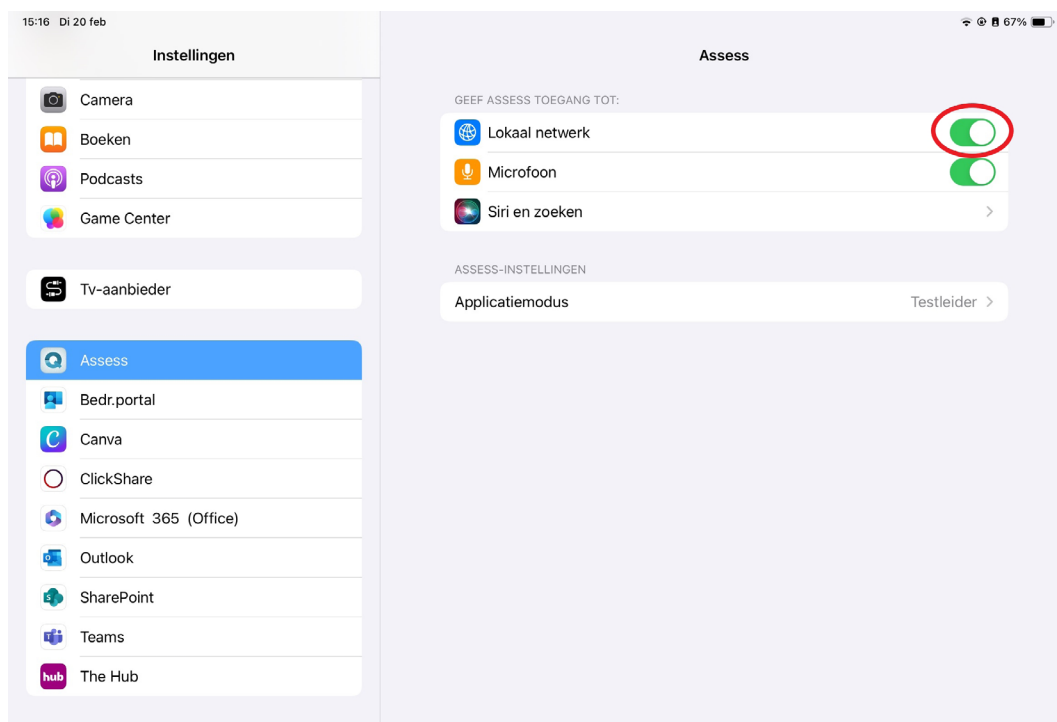

2. Central-omgeving

De Central-omgeving van Q-interactive is het begin- en eindpunt van alle afnames.

Central is web-gebaseerd, wat betekent dat het via alle apparaten met internet bereikbaar is. In de hierbij gebruikte voorbeelden wordt de browser Safari gebruikt, maar dit kan dus net zo goed door middel van andere browsers.

- Inloggen op de centrale omgeving

Stap 1. Ga naar <https://qiactive.com/choose-share/login/loggedOut>

Stap 2. Voer je Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik vervolgens op 'Log in'.



* Je kunt ook inloggen via Single Sign-on (SSO). Voor meer informatie kun je contact opnemen via het volgende contactformulier: <https://www.pearsonclinical.nl/contactformulier>

- Instellen van de Twee-factor Verificatie

Wanneer je voor het eerst inlogt, wordt er gevraagd één of meerdere methoden voor tweestapsverificatie in te vullen. Dit kan middels Google Verificator, je e-mailadres of het telefoon-nummer.

Stap 1: Kies één of meerdere methodes uit. Klik op 'Stel GV in' voor Google Verificator of vul je e-mailadres en/of telefoonnummer in en klik daarnaast op 'Valideer'.

Stap 2: Doorloop vervolgens de stappen voor de door jouw gekozen methode(s). Wanneer je hiermee klaar bent, klik je rechtsboven op 'Opslaan'. Vervolgens kun je opnieuw inloggen met de gekozen methode.

Welkom | Log uit | Account | Voor ondersteuning neem contact op met info-ri@pearson.com

Q-interactive™

Overzicht | Cliënten | Batterijen | Afnames | Klantenservice

Twee-factor Verificatie ? [Opslaan](#)

Mijn profiel
Wachtwoord wijzigen
Twee-factor Verificatie

U kunt zoveel aanvullende verificatie methoden gebruiken als u zou willen, u moet er echter MINIMAAL EEN kiezen om in te loggen in Q-Interactive. Sta andere optionele methoden toe, wanneer toepasbaar om verificatie issues te minimaliseren. De gegenereerde codes zullen verstuurd worden naar het opgegeven emailadres of mobiele nummer tijdens deze setup en later wanneer er gevraagd wordt om een login voor de Twee-Factor Verificatie.

Het is nodig om de Google Verificator (GV) op uw mobiele apparaat te downloaden voor het instellen. Met een nieuwe telefoon, moet u **Google Verificatie opnieuw in**.

Google Verificatie Set-up **Stel GV in**

2FV Emailadres **Valideer**

Email code **Bevestigen**

2FV Mobile telefoonnummer **Valideer**

Mobile telefoon code **Bevestigen**

- Nieuwe cliënten aanmaken

Wanneer je op het tabblad 'Cliënten' klikt, krijg je een overzicht van je cliënten te zien.

Stap 1: Klik op de blauwe knop rechts in beeld, 'Maak nieuwe aan'. Vervolgens opent er een nieuw scherm.

Q-interactive™

Overzicht | Cliënten | Batterijen | Afnames | Support

Zoek naar: **Zoek** **Maak Nieuwe aan**


Mijn huidige cliënten
Gearchiveerde cliënten
Oefencliënten

Naam cliënt	Client ID	Datum van de laatste afname
Stokkers, Lynn	2512	7-jun-2023
Stokkers, Lynn	98652	

Toon: 10 Toon: 1-2 van 2 Eerst ◀ Vorige Volgende ▶ Laatste

© Copyright 2012-2023 NCS Pearson, Inc. All rights reserved.
Privacyverklaring | Gebruiksvoorwaarden

Stap 2: Nu kun je de gegevens van je cliënt invoeren. Alle velden dienen ingevuld te worden. Het Cliënt ID kun je zelf bepalen, afhankelijk van je administratie. Let er goed op dat de geboortedatum correct wordt ingevuld, deze wordt namelijk door het systeem gebruikt bij het berekenen van normscores en het bepalen van het startitem.

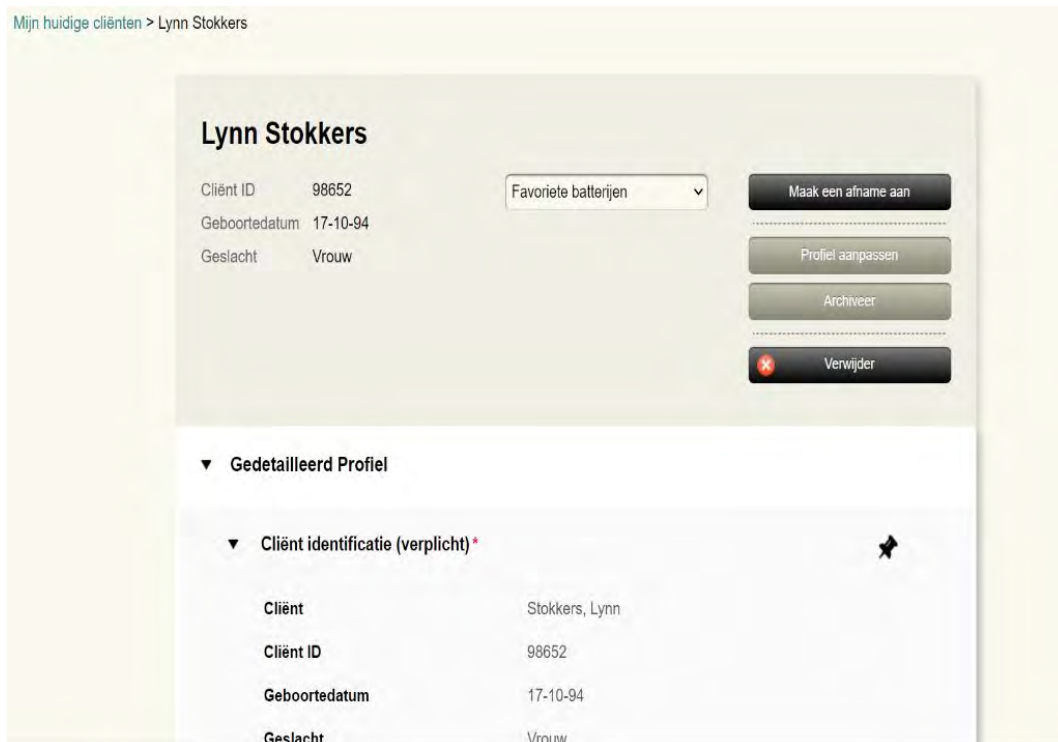

Hierna verschijnt het profiel van de zojuist gecreëerde cliënt in beeld.

Het is nog mogelijk om dit profiel aan te passen. Hiervoor klik je rechtsboven op 'Profiel aanpassen'. Wanneer je terug wilt gaan naar je cliëntenoverzicht klik je links op 'Mijn huidige cliënten'. Ook is het mogelijk om vanuit het profiel direct een afname aan te maken voor deze cliënt. Hiervoor klik je op 'Maak een afname aan'.

- Batterijen aanmaken

Onder het tabblad 'Batterijen' vind je een overzicht van alle op Q-interactive beschikbare testbatterijen. Naast deze batterijen is het ook mogelijk om zelf op maat gemaakte batterijen samen te stellen.

Stap 1: Klik rechts bovenin op 'Maak nieuwe batterij aan'.

Welkom Mevr Lynn Stokkers | Log uit | Account | Beheer | Voor ondersteuning neem contact op met www.pearsonclinical.nl/contactformulier

Q-interactive™

Overzicht | Cliënten | Batterijen | Afnames | Support

Favorieten + Zoek

Maak nieuwe batterij aan

Leeftijdsgroep	Domein	Subtest type	Testnaam	Beschrijving	Subtests	Tijd
			CEL F-5-NL Leertijden 5-8	Een flexibele test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.	10 subtests	97 min
			CEL F-5-NL Leertijden 9-18	Een flexibele test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.	10 subtests	108 min
			D-KEFS-NL	Een uitgebreide afname van de kerncomponenten van executief functioneren.	3 subtests	27 min
			NEPSY-II-NL	Een kind kan met de NEPSY-II-NL uitgebreid worden getest om gedetailleerde en uitgebreide informatie te verkrijgen over zijn neuropsychologische functioneren.	8 subtests	51 min
			TEST		5 subtests	46 min

Stap 2: Door op het zwarte pijltje links van een test te klikken, kun je de verschillende subtests van deze test inzien. Klik hierop bij de test(s) waarvan je onderdelen wilt toevoegen.

Stap 3: Klik bij onderdelen die je wilt toevoegen op 'Toevoegen' aan de rechterzijde. Via de blauwe knop rechtsboven zie je welke onderdelen in je Batterij zitten.

Overzicht | Cliënten | Batterijen | Afnames | Support

Favorieten + Zoek

4 subtests in de batterij

Uw batterij

4 subtests 30 min

1	CEL F-5-NL Leertijden 5-8: Zinnen Begrijpen	6 min	Verwijder
2	CEL F-5-NL Leertijden 5-8: Linguïstische Concepten	6 min	Verwijder
3	CEL F-5-NL Leertijden 5-8: Woordstructuur	10 min	Verwijder
4	CEL F-5-NL Leertijden 5-8: Woordcategorieën	8 min	Verwijder

Annuleer deze nieuwe batterij | Configureer en Sla op

4 CEL F-5-NL Leertijden 5-8 Woordcategorieën Toegevoegd

5 CEL F-5-NL Leertijden 5-8 Aanwijzingen Volgen Toevoegen

Stap 4: Wanneer je klaar bent met je selectie, klik je op 'Configureer en sla op' onder in het overzicht van de geselecteerde subtests.

Stap 5: Je kunt je samengestelde batterij nu een naam geven. Daarnaast kun je een beschrijving invoeren. Ook dien je aan te geven of je deze batterij alleen zichtbaar wilt maken voor jezelf, of dat anderen binnen je organisatie hier ook mee kunnen werken. Tenslotte klik je rechtsonder in beeld op 'Opslaan'. De op maat gemaakte batterij bevindt zich bij de andere testbatterijen onder het tabblad 'Batterijen'.

- Afnames bekijken en klaarzetten

Onder het tabblad 'Afnames' zijn alle testafnames zichtbaar. Voor gebruikers met een beheerdersaccount zijn tevens alle afnames van de verschillende gebruikers binnen een account zichtbaar. De afnames zijn in vier categorieën verdeeld, namelijk:

Configureer standaardbatterij

Naam van de batterij:

Beschrijving (Optioneel)

Deze batterij zal zichtbaar zijn voor:

Alleen mij
 Alle [INTERNAL] Lynn TEST

	CELF-5-NL Leeftijden 5-8 - Zinnen Begrijpen	6 minuten
	CELF-5-NL Leeftijden 5-8 - Linguïstische Concepten	6 minuten
	CELF-5-NL Leeftijden 5-8 - Woordstructuur	10 minuten
	CELF-5-NL Leeftijden 5-8 - Woordcategorieën	8 minuten

TOTALE TIJD: 30 minuten

Terug naar het toevoegen van tests


-Vorbereiding: Hier staan alle gecreëerde testbatterijen die nog niet naar de iPad zijn gestuurd.

-Wachten op het afleveren op de iPad: Hier vind je alle testbatterijen die al wel naar de iPad onderweg zijn, maar daarop nog niet zijn opgehaald. De eerstvolgende keer dat je via de Assess app in de programmamodus 'testleider' inlogt op je iPad, zullen deze batterijen worden geladen.


-Afname en scoring: Hieronder vind je alle testbatterijen die op het moment worden afgenomen en gescoord in Assess.

-Rapporteren en exporteren: Hier vind je afgeronde testbatterijen waarvan reeds een rapport gegenereerd is.

Er zijn meerdere manieren om een nieuwe afname klaar te zetten. Op het tabblad 'Overzicht' vind je de blauwe knop 'Snel Aanmaken' en ook als je een cliënt selecteert of aanmaakt kun je een nieuwe afname voor die cliënt klaarzetten. In dit geval maken we een nieuwe afname aan vanuit het tabblad 'Afnames'.

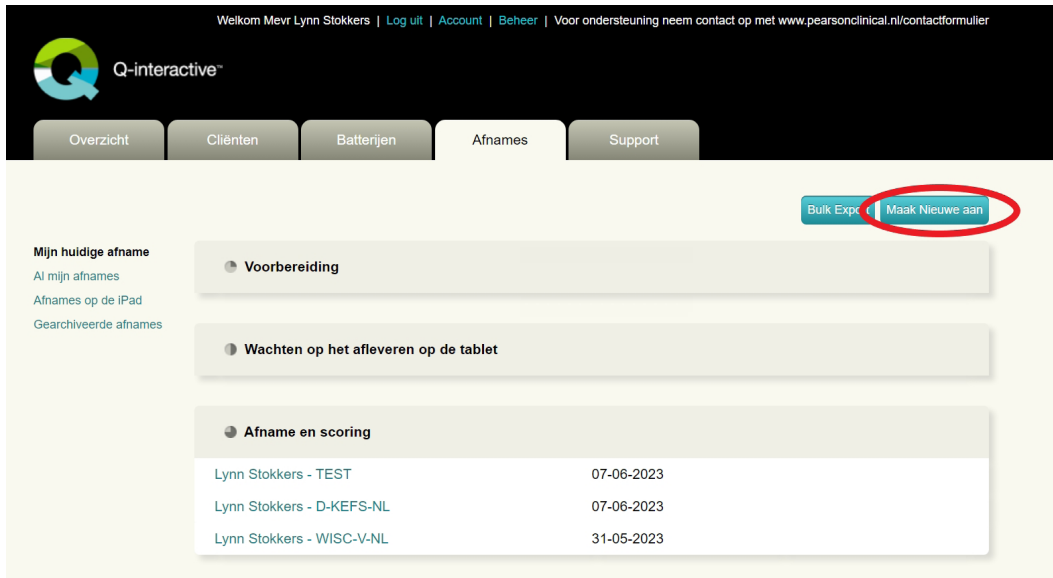

Stap 1: Nu dien je aan te geven voor welke cliënt je de afname klaar wilt zetten. Je kunt een reeds aangemaakte cliënt selecteren of een nieuwe cliënt aanmaken via de knop 'Nieuwe cliënt'.

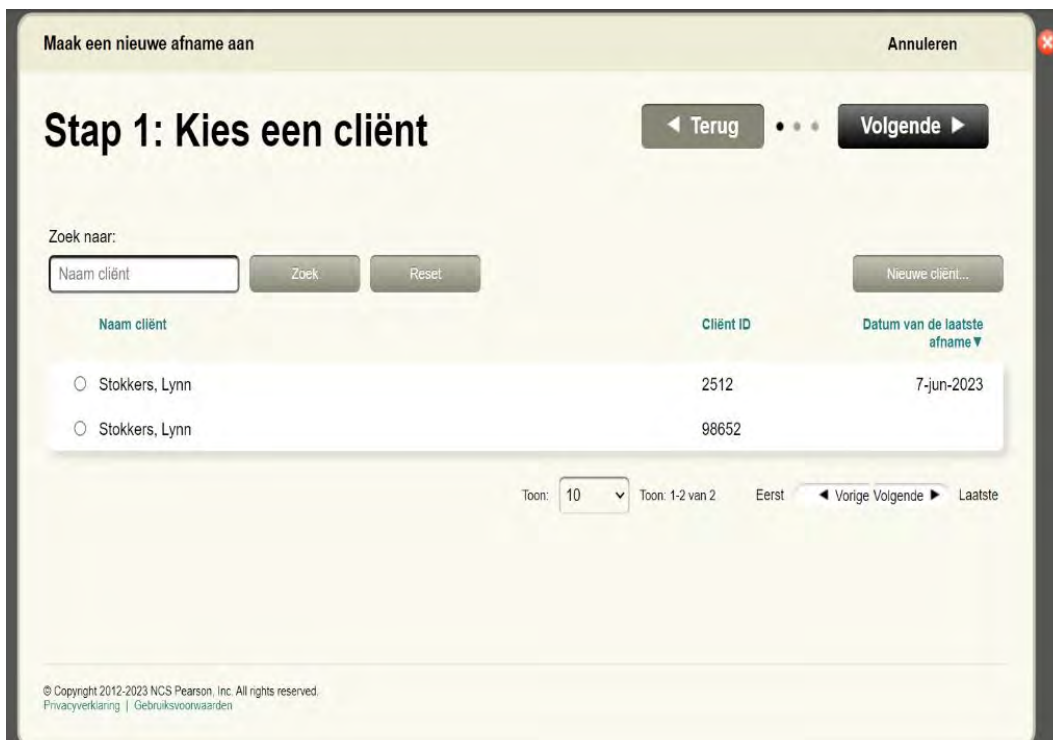

Stap 2: Hier kies je de test die je voor je cliënt wil klaarzetten. Je kunt voor zowel een complete test als voor losse onderdelen kiezen. Dit werkt hetzelfde als beschreven bij het onderdeel 'Batterijen'.

Stap 3: Vul vervolgens de details van je afname in.

Maak een nieuwe afname aan Annuleren

Stap 2: Kies een batterij

◀ Terug ••• Volgende ▶

Favorieten + Zoek 10 subtests in de batterij

Leeftijdsgroep +

Domein + ▶

Subtest type +

	CELF test		4 subtests 30 min	Toevoegen
	CELF-5-NL Leeftijden 5-8	Een flexibele test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.	10 subtests 97 min	Toevoegen
	CELF-5-NL Leeftijden 9-18	Een flexibele test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.	10 subtests 108 min	Toevoegen
	D-KEFS-NL	Een uitgebreide afname van de kerncomponenten van executief functioneren.	3 subtests 27 min	Toevoegen
	NEPSY-II-NL	Een kind kan met de NEPSY-II-NL uitgebreid worden getest om gedetailleerde en uitgebreide informatie te verkrijgen over zijn neuropsychologische functioneren.	8 subtests 51 min	Toevoegen

N.B. De geplande datum en tijd zijn voor je eigen planning. De normgroepen worden niet op deze data gebaseerd, maar worden altijd gebaseerd op het moment dat je een testafname start op de iPad.

Maak een nieuwe afname aan Annuleren

Stap 3: Afnamegegevens

◀ Terug ••• Einde ▶

Afname Details

Noodzakelijk

Afnametitel	<input type="text" value="CELF test"/>
Geplande afnamedatum	6 februari 2024
Geplande afnametijd	05 : 23 : 00
Tijdzone	America/New_York -05:00

Je afname staat nu klaar onder het kopje 'Vorbereiding'. Wanneer je op 'Stuur naar iPad' klikt, wordt de test verplaatst naar 'Wachten op het afleveren op de iPad'. De eerstvolgende keer dat je op de Assess-app inlogt, wordt de test geladen.

N.B. De Assess-app kan meerdere afnames tegelijkertijd opslaan. Het is dus mogelijk om meerdere batterijen naar de iPad te versturen.

- Oefenafname klaarzetten

Binnen Q-interactive is het mogelijk om gratis gebruik te maken van oefenafnames. Deze zijn gedurende de gehele licentieperiode te gebruiken. Oefenafnames kunnen je helpen om te oefenen en vertrouwd te raken met nieuwe tests.

Hoewel oefenafnames in grote lijnen gelijk zijn aan reguliere afnames, bestaan er een aantal verschillen. Zo is het niet mogelijk om een rapport te creëren van een oefenafname, om resultaten te exporteren en om item niveau scores in te zien. Hoewel het mogelijk is om scores in te voeren bij elk item, worden achteraf alle scores bijgesteld naar 0.

- Supportpagina bekijken met de handleidingen

Onder het tabblad 'Support' in de Central omgeving vind je de Q-interactive gebruikershandleiding en beheerdershandleiding. Daarnaast vind je hier testspecifieke gebruikershandleidingen die per test ingaan op hoe de afname via de iPads precies verloopt.

Als je links in beeld op 'Testmaterialen' klikt, dan vind je daar digitale versies van allemaal testonderdelen. Hier kun je bijvoorbeeld de Afname- en scoringshandleiding of de Technische handleiding van de WISC-V-NL of WAIS-IV-NL inzien, maar ook de Observatieschaal van de CELF-5-NL downloaden.




3. Assess-app


- Inloggen op de Assess-app

Nadat je een testafname vanuit Central klaar hebt gezet en naar de iPad hebt verstuurd, dien je in te loggen op Assess om de batterij te kunnen openen. Assess haalt de klaargezette batterij bij het inloggen op.

Stap 1: Open op beide iPads de Assess-app.

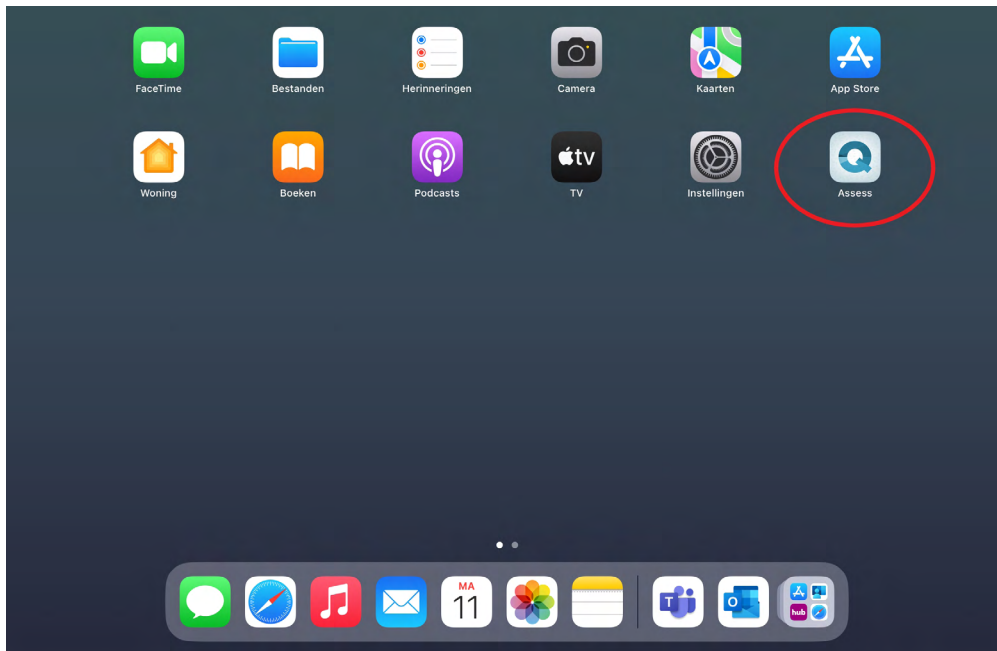

Stap 2: Log in met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord (deze zijn hetzelfde als bij Central).

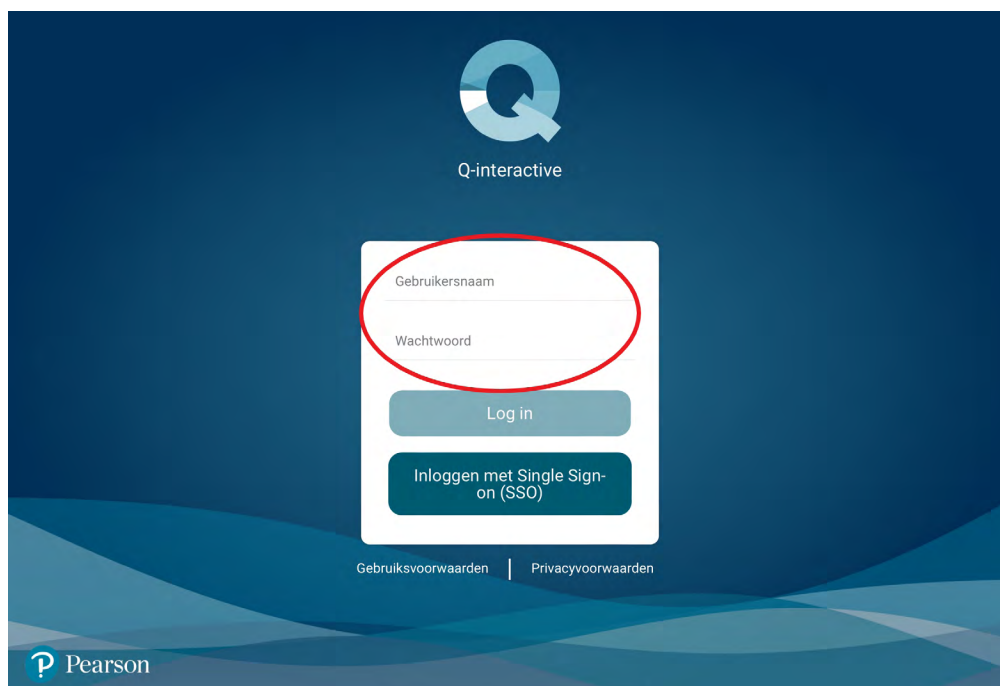

- Beginscherm

Na het inloggen op de testleider-iPad bevind je je in het beginscherm van Assess. Hier kun je al jouw cliënten inzien met daarbij de titel van de afname, de testdatum en de status van de afname.


Niet gestart: Afnames die nog niet gestart zijn.

Bezig: Er is een subtest gestart, maar de volledige afname is nog niet klaar.

To do: De afname is afgerond, maar er zijn nog items zonder score of items die zijn gemarkeerd met een vlag.

Compleet: De afname is volledig afgerond en er zijn geen openstaande items.

Ook is er een zoekfunctie om sneller een cliënt op te zoeken.

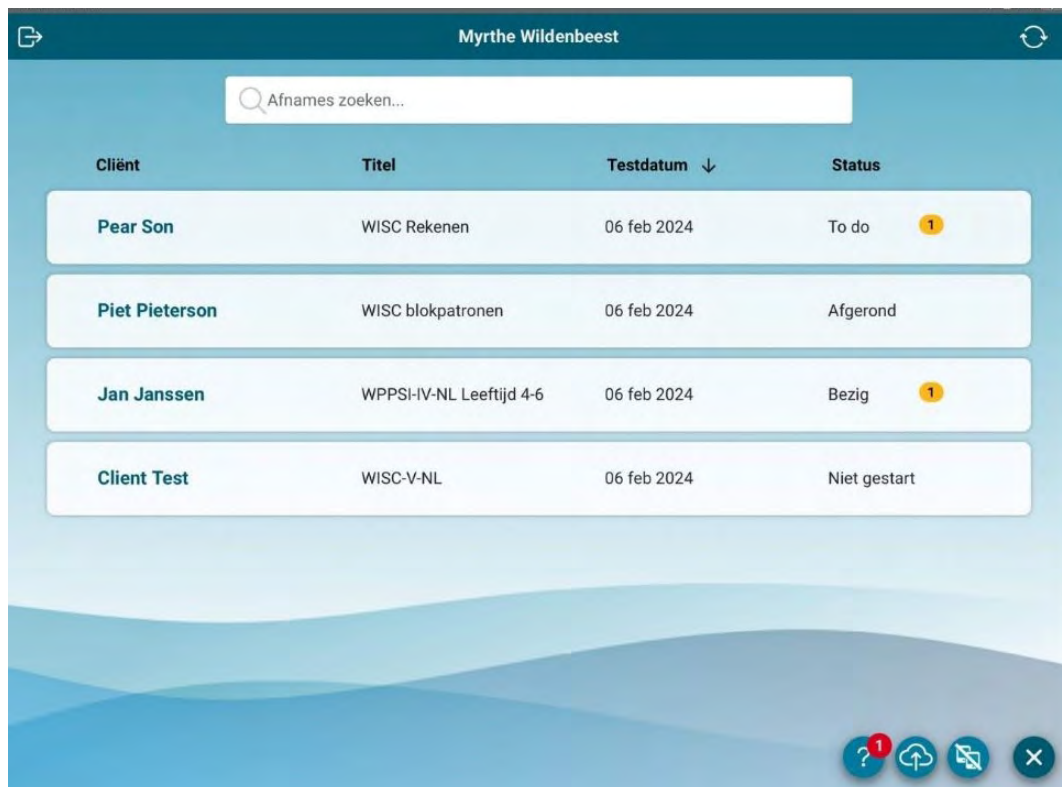

- Overzicht testbatterij

Zodra je op de cliënt tikt kom je in het onderstaande overzicht terecht. Hier zie je de cliënt gegevens, afname gegevens en de batterij in één scherm.

The screenshot shows the user profile for Lynn Stokkers. The profile is divided into two main sections: 'Cliënt' and 'Afname'.

Cliënt	
ID	98652
Naam	Lynn Stokkers
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum:	17 okt 2010
Leeftijd	13 jaar, 3 maanden, 20 dagen

Afname	
Titel	CELF test
Duur	32 min
Status	Niet gestart
Startdatum	06 feb 2024

At the top right, there are buttons for 'Verwijder', 'Bewerk', 'To do', and 'Start'. Below the profile, the 'Batterij' section shows a list of tests:

- Woordcategorieën (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) - Niet gestart
- Aanwijzingen Volgen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) - 8 min
- Zinnen Formuleren (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) - 10 min
- Zinnen Herhalen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) - 6 min

- Bewerken van de afname

Als je in het overzicht van de testbatterij op de knop 'Bewerk' klikt, dan kun je de batterij aanpassen. Aan de rechterkant kun je de huidige batterij inzien, aan de linkerkant zie je de gehele test bibliotheek. Vanuit de test bibliotheek kun je naar wens nieuwe subtests toevoegen aan de huidige batterij. Dit doe je door een subtest aan te klikken. Deze subtest verschijnt dan automatisch onderaan de huidige batterij. Je kan de volgorde van subtests in de huidige batterij aanpassen door een subtest lang ingedrukt te houden en deze dan naar boven of beneden te slepen. Als je klaar bent, klik dan op 'Opslaan'.

The 'Bewerk Batterij' screen is split into two columns: 'Test bibliotheek' and 'Huidige batterij'.

Test bibliotheek:

- CELF-5-NL Leeftijden 5-8 (82 min)
- CELF-5-NL Leeftijden 9-18 (91 min)
- + ALLES TOEVOEGEN
- Woordcategorieën (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (8 min)
- Aanwijzingen Volgen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (8 min)
- Zinnen Formuleren (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (10 min)
- Zinnen Herhalen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (6 min)
- Tekstbegrip (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (10 min)
- Definities van Woorden (CELF-5-NL Leeftijden 9-18) (8 min)


Huidige batterij:

- Woordcategorieën (CELF-5-NL Leeftijden 9-18)
- Aanwijzingen Volgen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18)
- Zinnen Formuleren (CELF-5-NL Leeftijden 9-18)
- Zinnen Herhalen (CELF-5-NL Leeftijden 9-18)

At the top right of the 'Bewerk Batterij' screen, there are buttons for 'Annuleren' and 'Opslaan'.


- Starten afname

Wanneer de afname klaar staat kunnen we de afname gaan starten. Klik hiervoor op de groene start knop.

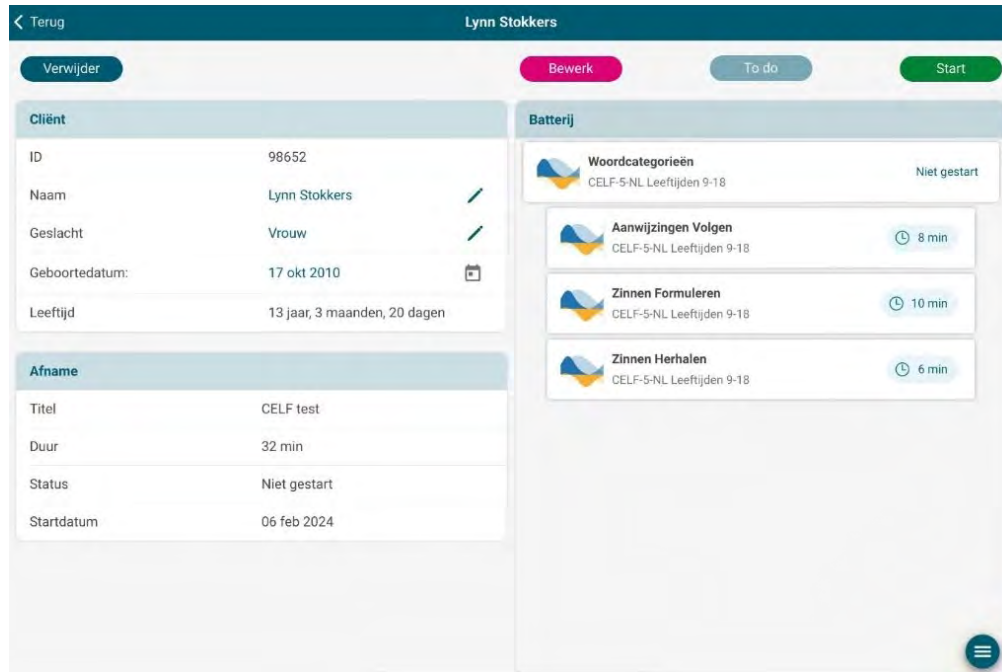

- Synchroniseren van de afname


Na het afnemen van de testbatterij is het belangrijk om de afname terug te synchroniseren naar je centrale omgeving. Ga hiervoor terug naar het beginscherm. Rechtsboven in dit scherm zie je een ronddraaiende button met pijlen erin verwerkt. Dit is de synchronisatie knop.

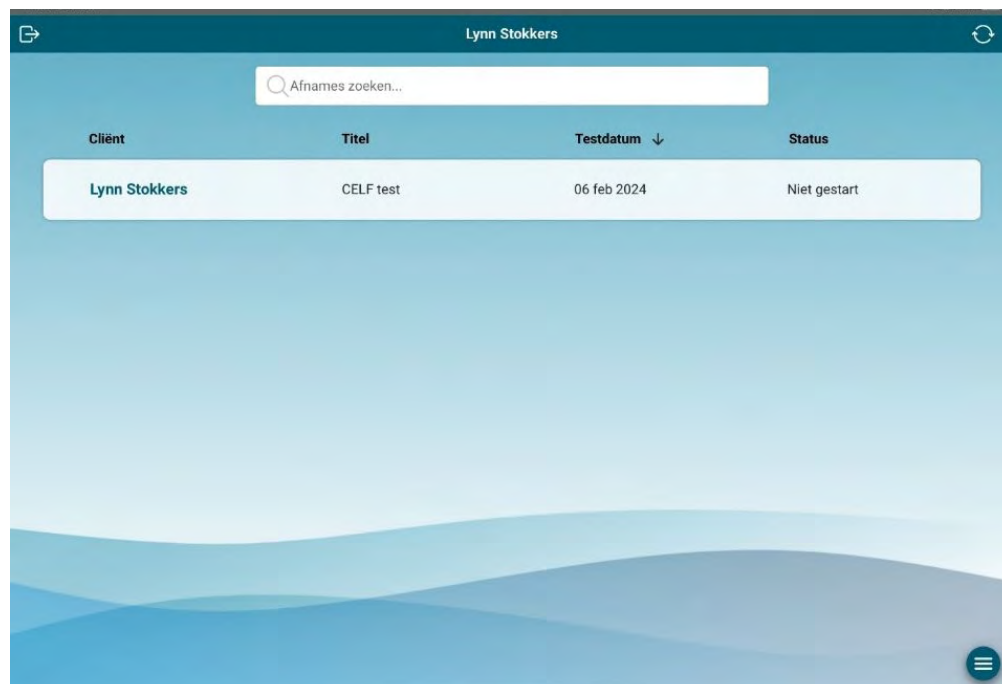


4. Resultaten uit Assess bekijken in Central

Nu de testresultaten zich in Central bevinden, kunnen we deze hierin opzoeken.

Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door op het tabblad 'Cliënten' de betreffende cliënt op te zoeken en dan op de testafname te klikken (zoals hieronder). Je vindt je afnames ook terug via het tabblad 'Afnames' onder de kop 'Afname en scoring'.

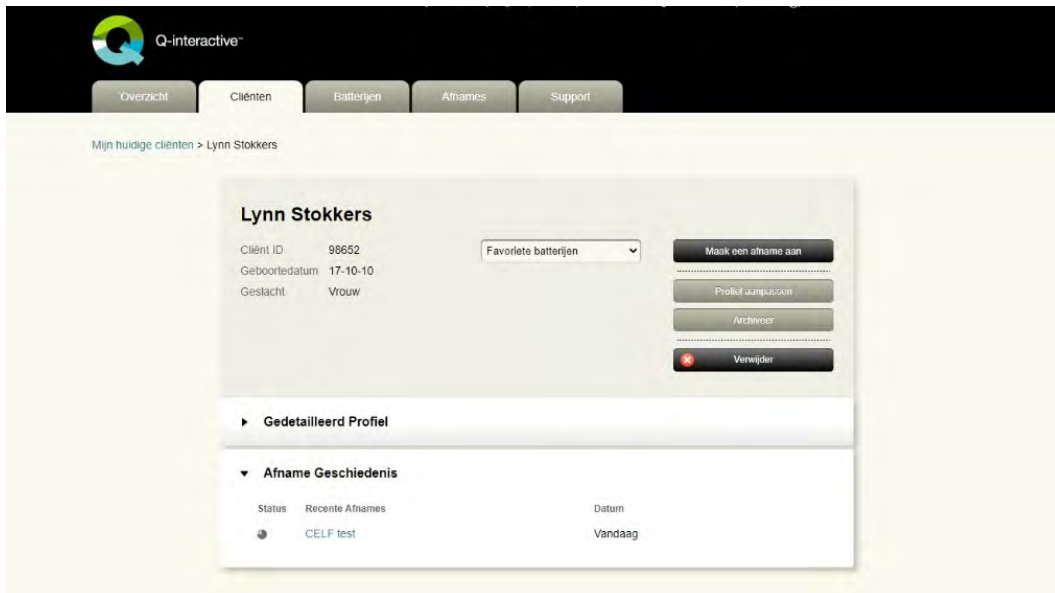

Vervolgens zie je een overzicht van de afgenomen test. Vanuit dit scherm kun je meerdere acties ondernemen. In de paragrafen hierna worden de weergegeven knoppen toegelicht.

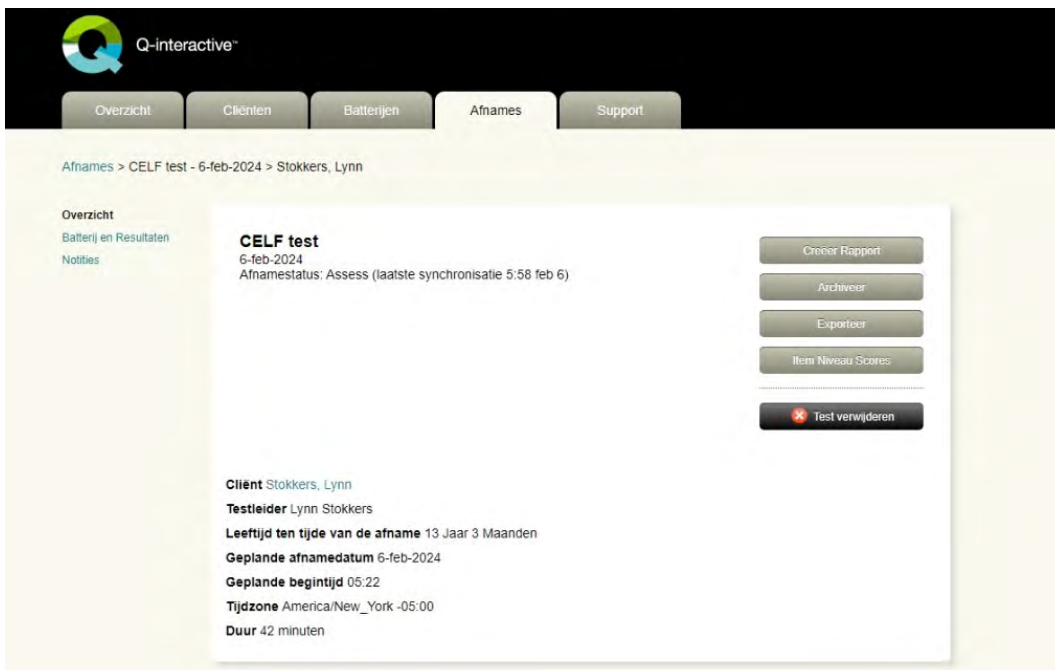

- Batterij en Resultaten

Door in het overzicht van de afgenomen test op de knop 'Batterij en Resultaten' te klikken, krijg je inzicht in de ruwe en de geschaalde scores van de subtests. Met de pijltjes naast de subtests kun je meer specifieke informatie inzien zoals de Item Ruwe Scores en aanvullende metingen. Door met je muis over de zwarte vierkantjes te gaan, kun je de betrouwbaarheidsintervallen en percentielscores inzien.

Door naar het tabje 'Indexen' te gaan, krijg je inzicht in de Indexscores.

Afnames > CELF test - 6-feb-2024 > Stokkers, Lynn

Overzicht
Batterij en Resultaten
Notities

Batterij en Resultaten
6-feb-2024
Afnamestatus: Assess (laatste synchronisatie 5:58 feb 6)

Creëer Rapport
Exporteer
Item Niveau Scores
Test verwijderen

Subtests Indexen Vergelijkingen

CELF-5-NL Leeftijden 9-18

Normen:
Nederland

	Geschaalde Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
▶ Woordcategorieën	13																			
▶ Aanwijzingen Volgen	3																			
▶ Zinnen Formulieren	2																			
▶ Zinnen Herhalen	1																			
▶ Tekstbegrip	-																			

- Notities

Vanuit het overzicht van de afgenomen test kun je via de knop 'Notities' de tijdens de testsessie gemaakte notities bekijken. Door op een notitie te klikken wordt deze uitvergroet.

Afnames > CELF test - 6-feb-2024 > Stokkers, Lynn

Overzicht
Batterij en Resultaten
Notities

Notities
6-feb-2024
Afnamestatus: Assess (laatste synchronisatie 5:58 feb 6)


Creëer Rapport
Exporteer
Item Niveau Scores
Test verwijderen

CELF-5-NL Leeftijden 9-18 Zinnen Formulieren Opgave 9. derde

Note


- Creëer Rapport

Op het moment bieden bijna alle tests de mogelijkheid om een rapport te creëren in een PDF formaat. Door in het overzicht van de afgenomen test op de knop 'Creëer Rapport' te klikken, komt je in een Rapport Configuratiescherm terecht. Hierin kun je, indien gewenst, aanpassingen maken. Klik vervolgens op 'Genereer Rapport'. Er wordt nu automatisch een rapport gedownload, welke je terug kunt vinden in de Downloads map in je bestanden.

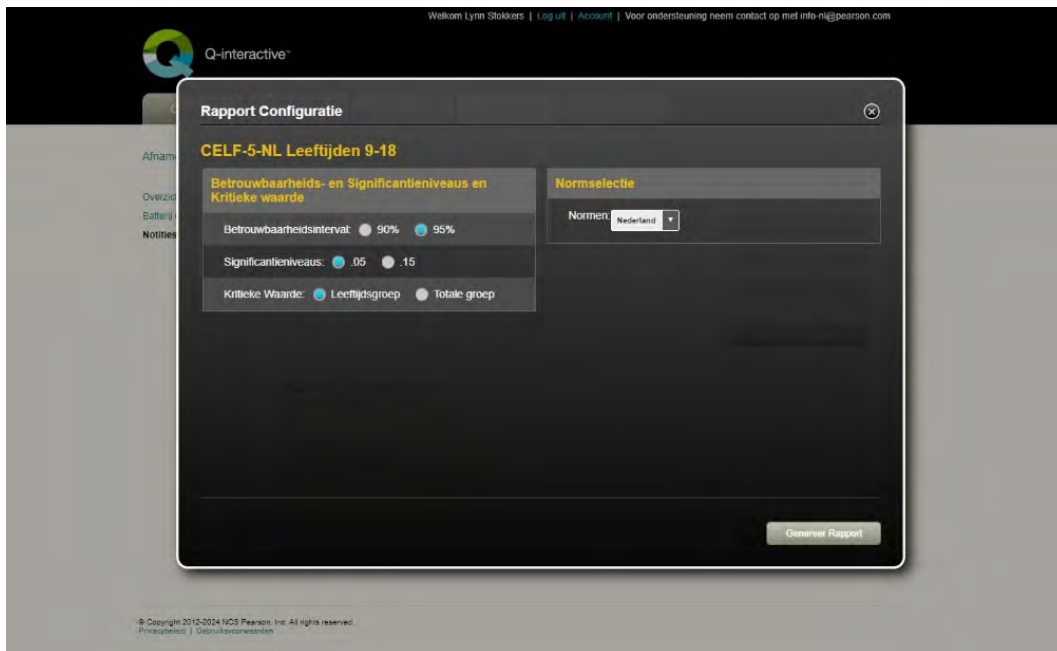

- Archiveer

Vanuit het overzicht van de afgenomen test kun je de afname ook archiveren. Wanneer je hierop klikt, wordt de afname verplaatst naar 'Gearchiveerde afnames' onder het tabblad 'Afnames'. Mocht je de test willen dearchiveren, open de afname dan nogmaals en klik op 'Dearchiveer uit archief'.

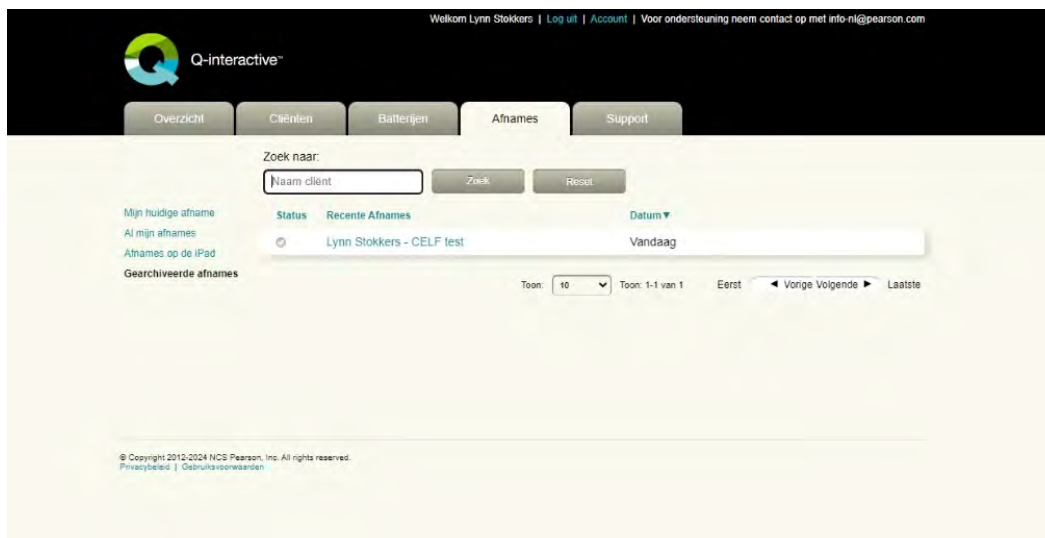

- Item Niveau Scores

Met de knop 'Item Niveau Scores' in het overzicht van de afgenomen test, kun je op itemniveau de afgenomen subtests terugkijken. Hierbij kun je veel specifieke informatie per subtest inzien, zoals de afrondingstijd (indien van toepassing), verbale responses en gebeurtenissen die je hebt aangeklikt zoals 'Geen antwoord', 'Weet niet' of 'Doorvragen'. Het itemniveau scorerapport is een digitale versie van het papieren scoreformulier.

Via de blauwe knop kun je het item niveau scores rapport printen. Je kunt het rapport ook digitaal opslaan door in het Afdrukinstellingen scherm onder 'Bestemming' de optie 'Opslaan als pdf' te selecteren.

Items	Rijw score	Respons	Gebeurtenissen
Oefenopgave 1 Leeftijden 5-10 jaar Toon details	-		
Oefenopgave 2 Leeftijden 5-10 jaar Toon details	-		
Oefenopgave 1 Leeftijden 11-15 jaar Toon details	C		
Oefenopgave 2 Leeftijden 11-15 jaar Toon details	C		
Opdracht 1 Toon details	1		
Opdracht 2 Toon details	1		
Opdracht 3 Toon details	1		
Opdracht 4 Toon details	1		
Opdracht 5 Toon details	1		
Opdracht 6 Toon details	1		
Opdracht 7 Toon details	1		

Items	Rijw score	Respons	Gebeurtenissen
Opdracht 12 Toon details	1		
Opdracht 13 Toon details	1		
Opdracht 14	1		
Opdracht 15	0		
Opdracht 16	1	sl	
Opdracht 17	1		
Opdracht 18	1		
Opdracht 19	0		
Opdracht 20	0		
Opdracht 21	1		
Opdracht 22	1		
Opdracht 23	1		
Opdracht 24	1		
Opdracht 25	1		
Opdracht 26	1		
Opdracht 27	1		
Opdracht 28	1		
Opdracht 29	0		
Opdracht 30	1		
Opdracht 31	1		
Opdracht 32	1		
Opdracht 33	1		
Opdracht 34	1		
Opdracht 35	0		

Volg de gratis online [Q-interactive training](#) voor uitgebreide instructies over het platform

+31 (0)20 581 5500 | Pearson Clinical Benelux

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc. iPad is a registered trademark of Apple Inc. C5429 SR 05/23